

Realizzazione mascherine Progetto Friuli Solidale - SMS



Sommario


Sommario	1
KIT PER LA REALIZZAZIONE.....	2
Preparazione del materiale	3
Ringraziamenti.....	13
Allegato 1 – Schema per cucitura	14

KIT PER LA REALIZZAZIONE

Verrà consegnato un kit con all'interno:

- N° 300 mt di materiale SMS pretagliato in fasce da 60 x 20 cm
- Elastico (circa 120 mt)
- Un campione della mascherina (se disponibile)
- Schema per linee guida cucitura come da esempio sotto

Schema per linee guida cucitura

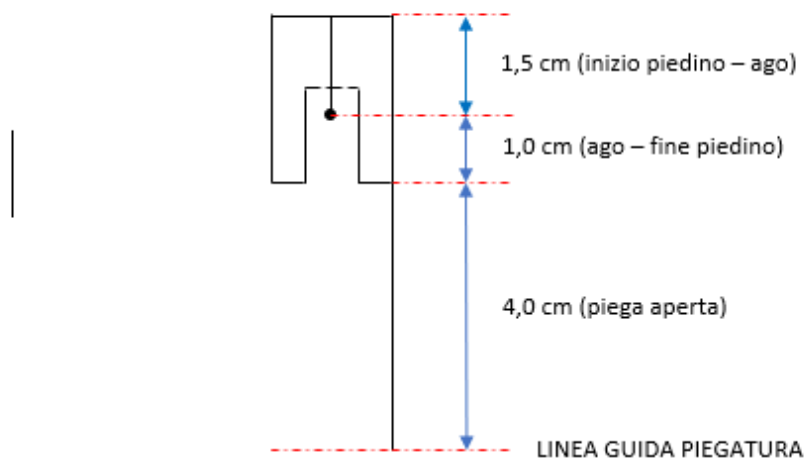


N.B. La dimensione della piega chiusa dovrebbe risultare 2 cm

Preparazione del materiale

1. Prendere la fascia pretagliata di materiale SMS 60 x 20 cm



2. Effettuare una prima piega della fascia, di lunghezza 20 cm

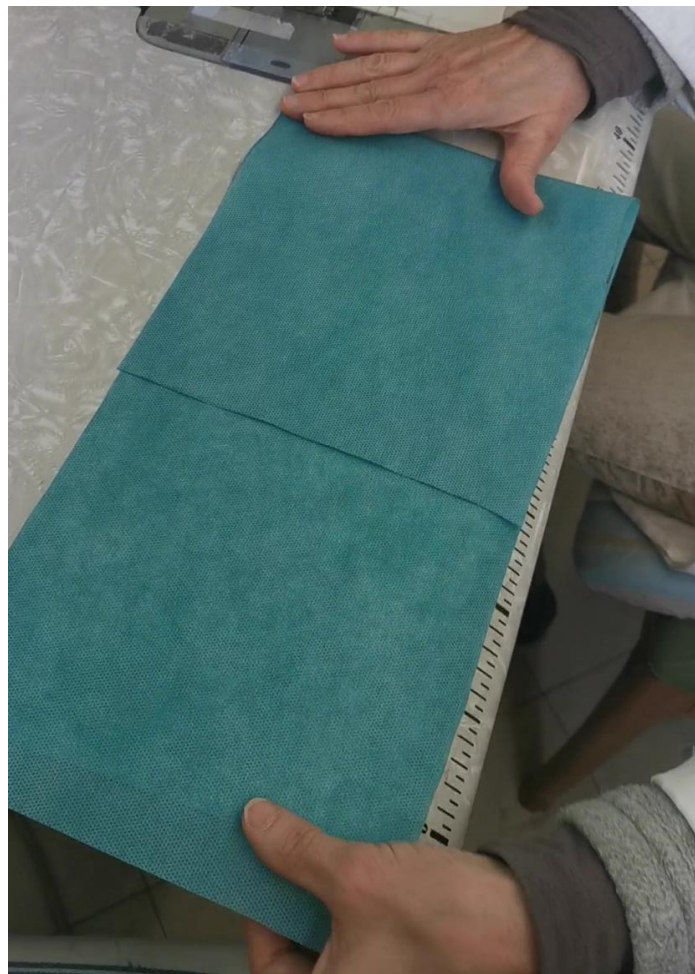

3. Effettuare una seconda piega di 20 cm, sovrapposta alla precedente



4. Il risultato sarà un quadrato 20 x 20 cm



5. Cucire quindi la bordatura per chiudere il quadrato ottenuto



6. Ripetere l'operazione sul lato opposto



7. Prendere quindi un elastico da 20 cm e inserirlo per circa 2 cm in uno dei bordi rimasti aperti



8. Cucire quindi l'elastico per fermarlo alla bordatura



9. A questo punto, facendosi aiutare dallo schema di cucitura, sollevare, piegare su se stessa una striscia di circa 4 cm e cucirla fino a far combaciare la fine del piedino con la fine della piega. Il risultato sarà una piega di circa 2 cm di grandezza



10. Effettuare quindi la stessa operazione per realizzare una seconda piega (sempre da 4 cm, che ripiegata misurerà 2 cm). Fermarsi quando la fine del piedino coincide con la fine della piega



11. Effettuare anche la terza piega facendo attenzione all'inserire l'altra estremità dell'elastico (per circa 2 cm) nel lato aperto, vicino al bordo e cucire



12. Il risultato finale sarà come quello da immagine sotto



13. Prendere un altro elastico e procedere alla cucitura sul lato opposto



14. Per effettuare la piega sul lato opposto al precedente, sollevare il lembo del materiale (all'altezza dei 4 cm, come da riferimento) e cucire



15. Effettuare quindi anche la seconda piega e cucire



16. Nell'effettuare la terza piega, assicurarsi di inserire l'elastico per circa 2 cm e fissarlo, cucendo



17. Tagliare eventuali eccedenze di filo




18. Il risultato finale sarà la maschera pronta



Ringraziamenti

Progetto realizzato con la collaborazione di:

- Confartigianato Udine
- Gruppo Ceccarelli
- Amici e amiche finanziatori
- Sarti e sarte di buona volontà

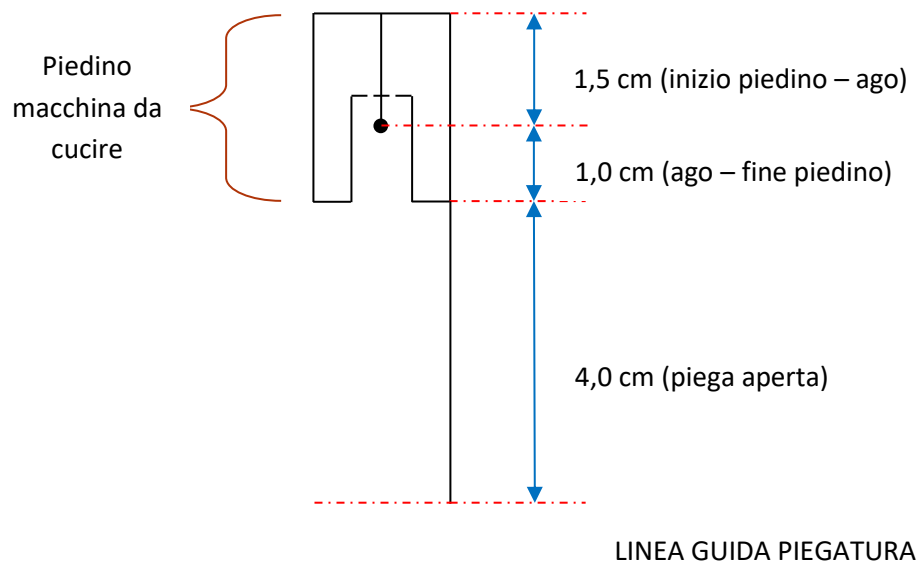Allegato 1 – Schema per cucitura**Schema per linee guida cucitura**

N.B. La dimensione della piega chiusa dovrebbe risultare 2 cm